

# Instrucțiuni de utilizare

BTE T 105

Oticon Verit™



Made for  
iPhone | iPad



Works with  
Android

**oticon**  
life-changing technology

# Introducere la acest ghid de utilizare

Această broșură vă prezintă modul de utilizare și întreținere a noilor dvs. proteze auditive. Citiți cu atenție acest ghid de utilizare, inclusiv secțiunea de **Avertismente**. Astfel veți putea beneficia la maxim de protezele auditive.



## **Avertismente**

Textul marcat cu un simbol de avertizare trebuie citit înainte de a folosi dispozitivul.

Specialistul dvs. pentru protezare auditivă a reglat protezele auditive pe măsura necesităților dvs. Dacă aveți întrebări suplimentare, contactați specialistul dvs. pentru protezare auditivă.

Un specialist pentru protezare auditivă (specialist în proteze auditive, audiolog, medic ORL (ochi, gât, urechi) și distribuitor de proteze auditive) este o persoană cu o educație corespunzătoare care a dovedit competențe în evaluarea profesională a auzului, selectarea, reglarea și livrarea de proteze auditive și reabilitare pentru persoanele care suferă de pierderea auzului. Educația specialistul pentru protezare auditivă este conform cu regulamentele naționale sau regionale.

\*Denumirea postului poate varia de la o țară la alta.

# Cuprins

## Despre

Prezentare generală a modelului	6
Modul de utilizare	8
Modul de utilizare pentru DemoFlex	10
Proteza auditivă și piesa auriculară	12

## Introducere

Identificarea protezelor auditive pentru partea stângă și dreaptă	16
PORNIREA/OPRIREA protezelor auditive	17
Performanțele bateriei	18
Când trebuie înlocuită bateria	20
Cum se înlocuiește bateria (mărimea 13)	22

## Utilizarea zilnică

Așezarea protezei auditive cu tub de sunet	24
Așezarea protezei auditive cu tub fin	25
Curățarea	26
Curățarea protezei auditive	27
Îngrijirea tubului și a mulajului	28

Continuare pe următoarea pagină

# Cuprins

Îngrijirea tubului subțire și a olivei auriculare	30
Înlocuirea pieselor auriculare standard	32
Curățarea pieselor auriculare personalizate	34
Înlocuirea filtrului ProWax	35
Modificarea volumului (opțional)	37
Modificarea programului	38
Activarea/dezactivarea sunetul protezelor auditive	40
<b>Opțiuni</b>	
PORNIREA/OPRIREA Bluetooth	42
Folosirea protezelor auditive cu dispozitive digitale	44
Asocierea și compatibilitatea	46
Gestionarea apelurilor	47
Broadcast Auracast	48
Accesorii wireless și alte opțiuni	49
Sertar pentru baterie rezistent la manipulare (opțional)	52

## **Tinnitus**

Tinnitus SoundSupport™ (opțional)	54
Ghid pentru utilizatorii Tinnitus SoundSupport	55
Limitarea duratei de utilizare	55
Opțiuni de sunet și ajustările volumului	56
Avertismente referitoare la Tinnitus	58

## **Avertismente**

Avertismente generale	59
-----------------------	----

## **Informații suplimentare**

Găsirea informațiilor despre produs	64
Protecția la apă și praf (IP68)	65
Condiții de utilizare	66
Informații tehnice	67
Garanția internațională	75
Garanția	76
Setările individuale ale protezei dvs. auditive	77
Sunetul și indicatorii luminoși LED	80
Depanarea	84

## Prezentarea modelului

Această broșură este valabilă pentru următoarele modele de proteze auditive:

BTE T 105

### FW 1.0

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oticon Verit 1 BTE T 105        | GTIN: (01) 05714464175703 |
| <input type="checkbox"/> Oticon Verit 2 BTE T 105        | GTIN: (01) 05714464175710 |
| <input type="checkbox"/> Oticon Verit 3 BTE T 105        | GTIN: (01) 05714464175727 |
| <input type="checkbox"/> Oticon Verit 4 BTE T 105        | GTIN: (01) 05714464175734 |
| <input type="checkbox"/> Oticon Verit DemoFlex BTE T 105 | GTIN: (01) 05714464175741 |

Cutia conține următoarele elemente:

- Proteze auditive
- MultiTool
- Lavetă moale



## Scopul utilizării

<b>Scopul utilizării</b>	Proteza auditivă are rolul de a amplifica și transmite sunetul la ureche.
<b>Indicații de utilizare</b>	Hipoacuzie bilaterală sau unilaterală, de tip neurosenzorial, de transmisie sau mixt, cu un grad de pierdere a auzului de la ușor (23 dB HL*) până la profund (95 dB HL*), cu configurație frecvențială individuală.
<b>Utilizatorul produsului</b>	Persoană cu pierdere a auzului care folosește o proteză auditivă și îngrijitorii acesteia. Specialistul pentru protezare auditivă responsabil cu reglarea protezei auditive.
<b>Grupul de utilizatori ai produsului</b>	Adulții și copiii cu vârsta peste 36 de luni.
<b>Mediul de utilizare</b>	La interior și exterior.
<b>Contraindicații</b>	Nu se adresează sugarilor cu vârsta mai mică de 36 de luni. Utilizatorii cu implanturi active trebuie să fie în special atenți la utilizarea protezei auditive. Pentru mai multe informații, citiți secțiunea <b>Avertismente</b> .

**Beneficii clinice**

Proteza auditivă are rolul de a asigura o înțelegere mai bună a vorbirii pentru a ajuta la facilitarea comunicării, îmbunătățindu-se astfel calitatea vieții.

*\* Conform specificațiilor American Speech-Language-Hearing Association, [asha.org](http://asha.org), utilizând media tonurilor pure la frecvențele de 0,5, 1 și 2 kHz.*

**NOTIFICARE IMPORTANTĂ**

Amplificarea protezei auditive este reglată în mod unic și optimizată în funcție de capacitățile dvs. auditive în timpul montării protezei auditive efectuate de specialistul pentru protezare auditivă.

## Modul de utilizare pentru DemoFlex

<b>Scopul utilizării</b>	Proteza auditivă are rolul de a amplifica și transmite sunetul la ureche.
<b>Indicații de utilizare</b>	Hipoacuzie bilaterală sau unilaterală de tip neurosenzorială, conductivă sau mixtă cu valori de la un grad ușor (23 dB HL*) și până la sever (95 dB HL*) a pierderii auzului, cu o configurație individuală a frecvenței.
<b>Utilizatorul produsului</b>	Persoană cu pierdere a auzului care folosește o proteză auditivă și îngrijitorii acesteia. Specialistul pentru protezare auditivă responsabil cu reglarea protezei auditive. Protezele auditive demonstrative sunt concepute pentru a fi utilizate de mai mulți utilizatori.
<b>Grupul de utilizatori ai produsului</b>	Adulții și copiii cu vârsta peste 36 de luni.
<b>Numărul de reutilizări permise</b>	Maximum 50 de cicluri de adaptare per proteză auditivă, pentru a se asigura performanța și siguranța intenționate ale dispozitivului.
<b>Mediul de utilizare</b>	La interior și exterior.

<b>Contraindicații</b>	Nu se adresează sugarilor cu vârsta mai mică de 36 de luni. Utilizatorii cu implanturi active trebuie să fie în special atenți la utilizarea protezei auditive. Pentru mai multe informații, citiți secțiunea <b>Avertismente</b> .
<b>Beneficii clinice</b>	Proteza auditivă are rolul de a asigura o înțelegere mai bună a vorbirii pentru a ajuta la facilitarea comunicării, îmbunătățindu-se astfel calitatea vieții.

\* Conform specificațiilor American Speech-Language-Hearing Association, [asha.org](http://asha.org), utilizând media tonurilor pure la frecvențele de 0,5, 1 și 2 kHz.

### **Disponibilitate limitată pe piață**

Soluția cu proteze auditive demo este disponibilă numai pe anumite piețe. Pentru mai multe informații, contactați specialistul dvs. pentru protezare auditivă.

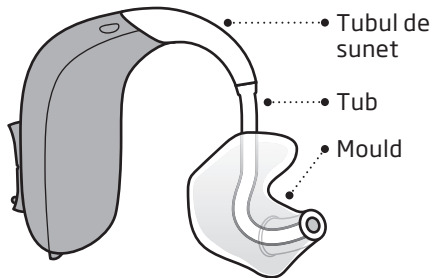
### **NOTIFICARE IMPORTANTĂ**

Amplificarea protezei auditive este reglată în mod unic și optimizată în funcție de capacitățile dvs. auditive în timpul montării protezei auditive efectuate de specialistul pentru protezare auditivă.


## Proteza auditivă și piesa auriculară

Există două accesorii diferite și mai multe piese auriculare disponibile pentru proteza dvs. auditivă.

**Cu tub de sunet și piesă auriculară olivă**



**Cu tub subțire**

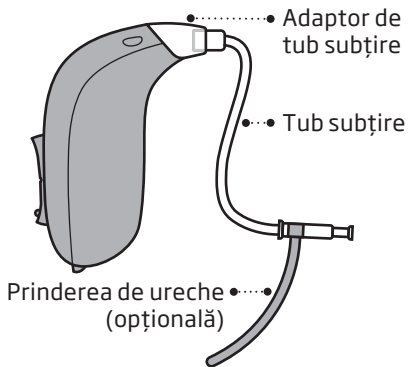

Tubul subțire folosește una dintre următoarele piese auriculare:

### Piese auriculare standard



Dom OpenBass



Dom pentru note joase,  
orificiu dublu



Dom Power



Grip Tip

Disponibil sub formă mică și mare,  
stânga și dreapta, cu sau fără orificiu.

### Piese auriculare personalizate

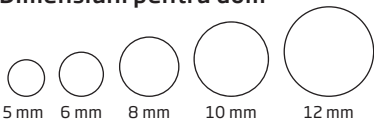


LiteTip\*



Micro olivă\*

### Dimensiuni pentru dom




\* Poate fi confecționată din materiale diferite..

Pentru detalii privind înlocuirea cupolei, consultați  
secțiunea „Înlocuirea olivei standard”.


# Cu tub de sunet și olivă
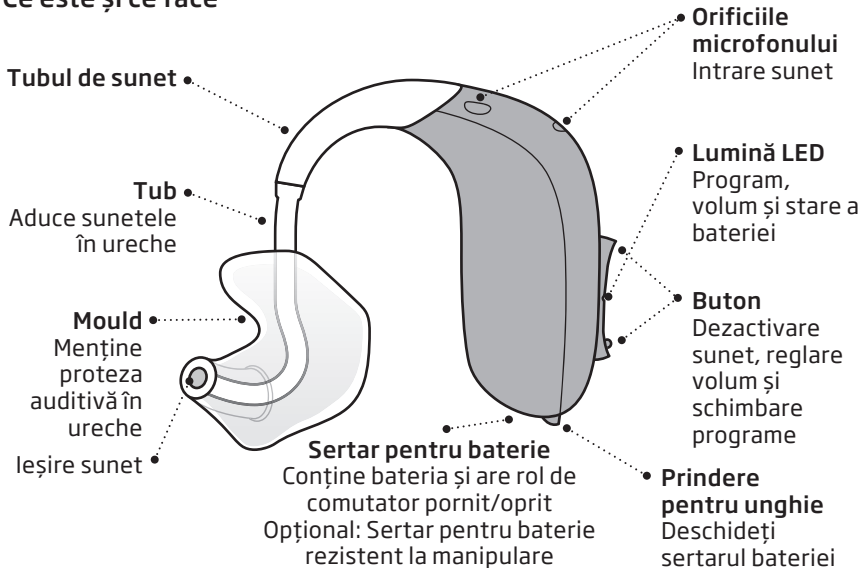
## Ce este și ce face



# Cu tub subțire

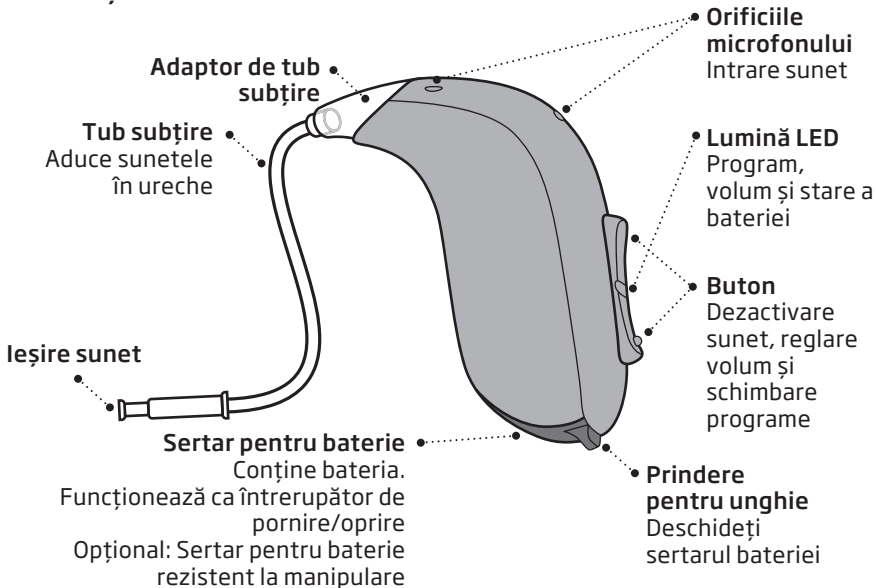Ce este și ce face




## Identificarea protezelor auditive pentru partea stângă și dreaptă

Este important să faceți deosebirea între proteza auditivă pentru partea stângă și cea dreaptă deoarece acestea pot fi programate diferit.

Indicatorii de culoare marchează protezele auditive pentru partea stângă și dreaptă. Un indicator **ROȘU** marchează proteza auditivă pentru DREAPTA. Un indicator **ALBASTRU** marchează proteza auditivă pentru STÂNGA.

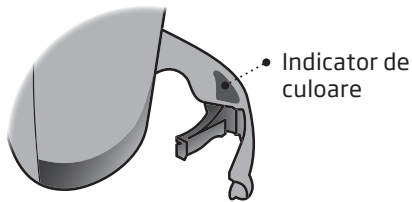Găsiți indicatorii colorați stânga/dreapta pe sertarul bateriei. Indicatorii se mai găsesc și pe Micro olive și olive (opțional).



## **PORNIREA/OPRIREA protezelor auditive**

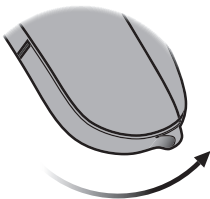
Sertarul bateriei este folosit pentru a PORNII și OPRI protezele auditive. În funcție de setările protezei auditive, s-ar putea să auzi o melodie la pornire.

### **Lumină LED**

O clipire verde prelungită indică faptul că proteza auditivă este pornită.


#### **Pornirea**

Închideți sertarul bateriei cu bateria montată



#### **Oprirea**

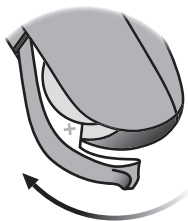Deschideți sertarul bateriei



## Performanțele bateriei

Performanțele bateriei variază în funcție de utilizarea individuală și de setările protezei auditive. Transmiterea sunetului de la un TV, telefon mobil sau dispozitivele de conectivitate poate influența performanțele acesteia.

Pentru a economisi bateria, aveți grijă ca protezele auditive să fie OPRITE atunci când nu le folosiți. Pentru a face o resetare rapidă a setărilor protezei auditive, deschideți și închideți sertarul bateriei.



## Când trebuie înlocuită bateria

Protezele dumneavoastră auditive indică atunci când bateria este aproape descărcată, fie prin redarea a trei tonuri alternative, fie printr-o notificare vocală (opțional), în anumite limbi. Specialistul pentru protezare auditivă poate seta protezele dvs. auditive în funcție de preferințele dvs.

Indicația se repetă periodic până la epuizarea bateriei.

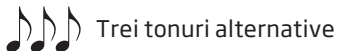
Când auziți indicația de baterie descărcată, aveți aproximativ 15 minute înainte ca bateria protezei auditive să se descarce complet. În acest moment, conectivitatea Bluetooth® este OPRITĂ.

Chiar înainte de epuizarea completă a bateriei, veți auzi patru tonuri descendente.

### Sfat privind bateria

Pentru a vă asigura că proteza auditivă funcționează întotdeauna, să aveți la dvs. baterii de rezervă sau înlocuiți bateria înainte de a pleca de acasă.

## Nivel scăzut al bateriei



Trei tonuri alternative

## Bateria este epuizată complet



Patru tonuri descendente



Notificare vocală

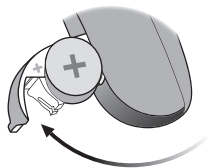
## Lumină LED pentru proteză auditivă

Clipiri **PORTOCALII** continue indică nivelul scăzut al bateriei.

Pentru informații privind tonurile, consultați secțiunea „Indicatori sonori și luminoși LED”.


# Cum se înlocuiește bateria (tip 13)

## 1. Scoateți



Deschideți complet sertarul bateriei. Scoateți bateria.

## 2. Ridicați

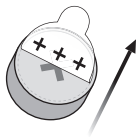


Îndepărtați eticheta adezivă din partea cu + a noii baterii.

Vârf:

Așteptați 2 minute pentru ca bateria să poată intra în contact cu aerul, asigurând astfel funcționarea optimă.


## 3. Introduceți

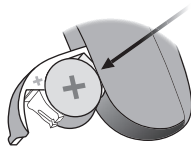

Introduceți bateria nouă în sertarul pentru baterie. Introduceți-o de sus, NU din lateral.

Asigurați-vă că partea cu + de la baterie și de la sertarul pentru baterie sunt aliniate.


#### 4. Închideți

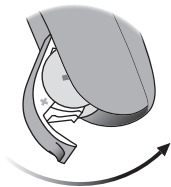

Închideți sertarul bateriei. Proteza auditivă va reda o melodie scurtă în piesa auriculară.

Țineți piesa auriculară aproape de ureche pentru a auzi melodia.

#### Vârf

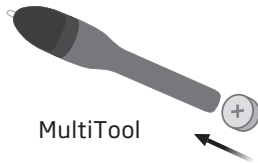


MultiTool poate fi folosit pentru a schimba bateria. Folosiți capătul magnetic pentru a scoate și introduce bateriile.

MultiTool vă este oferit de specialistul dvs. pentru protezare auditivă.

## Așezarea protezei auditive cu tub de sunet

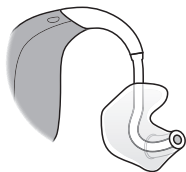Citiți această pagină dacă aveți o proteză auditivă cu cârlig acustic și mulaj auricular.




Oliva este personalizată pentru a se potrivi cu forma urechii dvs. Olivele sunt unice pentru urechea stânga sau dreapta.

### Pasul 1



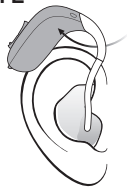Trageți ușor în exterior și introduceți oliva în direcția canalului urechii, răsucind ușor.

### Pasul 2



Așezați proteza auditivă în spatele urechii.

# Așezarea protezei auditive cu tub subțire

Citiți această pagină dacă aveți o proteză auditivă cu tub subțire.

## Pasul 1

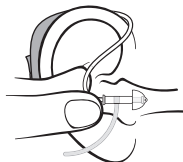


Așezați proteza auditivă în spatele urechii.

Tubul subțire trebuie utilizat numai cu olivă auriculară atașată.

Folosiți doar piese concepute pentru proteza dvs. auditivă.


## Pasul 2



Țineți cotul tubului între degetul mare și degetul arătător.

Oliva auriculară trebuie să fie orientată spre deschiderea canalului auditiv.

## Pasul 3

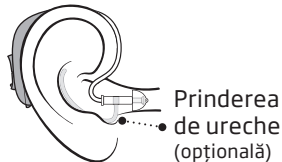


Împingeți ușor piesa auriculară în canalul auditiv până când tubul subțire se află aproape de capul dvs.

Dacă tubul subțire este prevăzut cu un sistem de prindere de ureche, așezați-l pe ureche în așa fel încât să urmărească conturul urechii.

## Curățarea

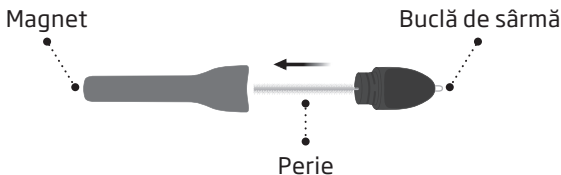MultiTool conține o perie și o buclă de sârmă pentru curățarea și îndepărtarea cerumenului. Dacă aveți nevoie de o nouă MultiTool, contactați specialistul dvs. pentru protezare auditivă.



### NOTIFICARE IMPORTANTĂ

Unealta MultiTool are un magnet încorporat. Țineți MultiTool la o distanță de cel puțin 30 cm (1 picior) față de cardul de credit și alte dispozitive sensibile magnetic.

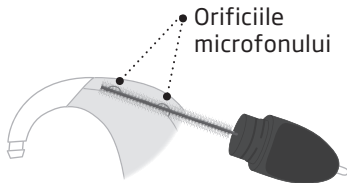
## Curățarea protezei auditive

Când manipulați proteza auditivă, țineți-o deasupra unei suprafețe moi pentru a preveni stricarea ei dacă o scăpați din mână.

### Curățați deschiderile microfonului

Folosiți peria MultiTool pentru a peria delicat mizeria din orificii și suprafața din jurul orificiilor.

Nu introduceți forțat piesele Multitool în orificiile microfonului. Se poate deteriora proteza auditivă.



### NOTIFICARE IMPORTANTĂ

Pentru curățarea protezelor auditive, folosiți o lavetă moale și uscată. Protezele auditive nu trebuie spălate sau scufundate niciodată în apă sau alte lichide.

## Îngrijirea tubului și a mulajului auricular

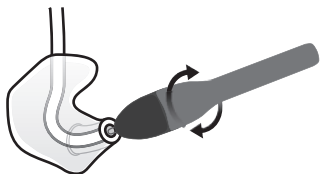
Citiți paginile următoare dacă aveți o proteză auditivă cu cârlig acustic și mulaj auricular.

### Curățați mulajul auricular

Oliva trebuie curățată în mod regulat. Folosiți o lavetă moale pentru a curăța suprafața sa. Folosiți bucla de sârmă de la MultiTool pentru a curăța deschiderea.

### Înlocuirea tubului

Tubul dintre olivă și proteza auditivă trebuie înlocuit dacă se îngălbenește sau devine rigid. Consultați specialistul pentru protezare auditivă în această privință.




# Spălarea olivei

## Pasul 1




Asigurați-vă că puteți identifica perechile olivă / proteză auditivă înainte de a deconecta oliva de la proteza auditivă.
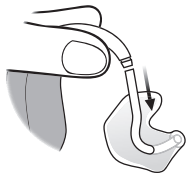
## Pasul 2



Scoateți tubul și oliva din mâner. Țineți mânerul ferm atunci când scoateți tubul. În caz contrar, proteza auditivă se poate deteriora.

## Pasul 3

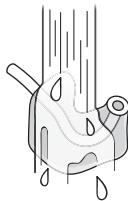

Spălați oliva și tubul cu un săpun delicat. Clătiți și uscați complet înainte de reconectarea la proteza auditivă.


## Îngrijirea tubului subțire și a olivei auriculare

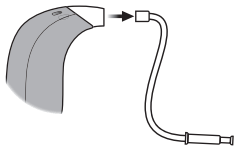Citiți paginile următoare dacă aveți o proteză auditivă cu tub subțire.

### Curățați tubul subțire


Tubul subțire trebuie curățat periodic, pentru a rămâne liber de umiditate și cerumen. Dacă nu este curățat, acesta se poate bloca cu cerumen care blochează transmiterea sunetului.

### Pasul 1




Scoateți tubul subțire din proteza auditivă și scoateți piesa auriculară.

### Pasul 2

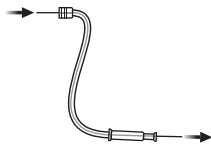

Împingeți instrumentul de curățare până la capătul tubului subțire.  
Contactați specialistul dumneavoastră pentru protezare auditivă pentru a obține instrumente adecvate de curățare a tubului subțire.

### Pasul 3

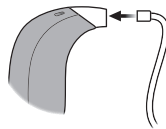


Reconectați tubul subțire la proteza auditivă.

# Înlocuirea pieselor auriculare standard

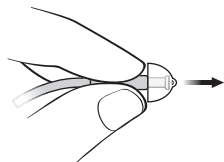
Piesa auriculară standard (domul sau Grip Tip) nu trebuie curățată. Dacă piesa auriculară se umple cu cerumen, înlocuiți-o cu alta nouă. Grip Tip-urile trebuie înlocuite cel puțin o dată pe lună.

## Pasul 1




Țineți de capătul tubului subțire și scoateți piesa auriculară.

## Pasul 2

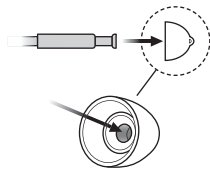

Introduceți tubul subțire exact în mijlocul piesei auriculare pentru a obține o fixare sigură.

## Pasul 3

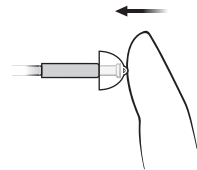

Împingeți ferm pentru a vă asigura că piesa auriculară s-a fixat bine.

### **NOTIFICARE IMPORTANTĂ**

Dacă piesa auriculară nu este pe tub atunci când este scoasă din ureche, piesa auriculară poate fi încă prezentă în canalul auricular. Pentru mai multe instrucțiuni, consultați specialistul dvs. pentru protezare auditivă.

## Curățarea pieselor auriculare personalizate

Piesa auriculară trebuie curățată în mod regulat.

Oliva auriculară este prevăzută cu un filtru de cerumen\* alb, care împiedică cerumenul și impuritățile să înfundă tubul subțire.

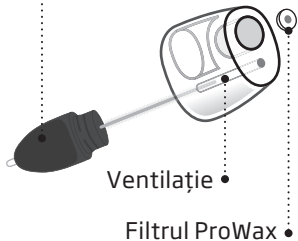
Asigurați-vă că înlocuiți filtrul atunci când este înfundat sau dacă proteza auditivă nu se aude normal.\*\*

Alternativ, contactați specialistul dvs. pentru protezare auditivă.

\* Nu toate olivele au un filtru de cerumen. Compoziția filtrului variază în funcție de olivă. Pentru mai multe informații, contactați specialistul dumneavoastră pentru protezare auditivă.


\*\* Pentru mai multe informații, consultați secțiunea **Înlocuirea filtrului ProWaxr**.

- Curățați ventilația prin împingerea instrumentului de curățare a ventilației prin orificiu. Contactați specialistul dvs. pentru protezare auditivă pentru a obține instrumentul adecvat pentru curățarea ventilației piesei auriculare.




# Înlocuirea filtrului ProWax
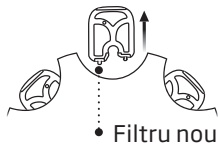
## 1. Instrument




Scoateți instrumentul din cutie. Instrumentul are doi pini: Unul gol pentru îndepărtare și altul cu noul filtru de cerumen.

## 2. Scoateți

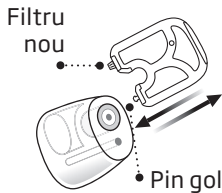

Introduceți pinul gol în filtrul de cerumen din piesa auriculară și scoateți-l.

## 3. Introduceți

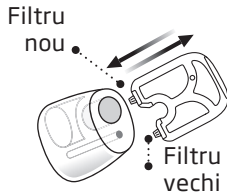

Introduceți noul filtru de cerumen folosind celălalt pin. Scoateți instrumentul și aruncați-l.


### **NOTIFICARE IMPORTANTĂ**

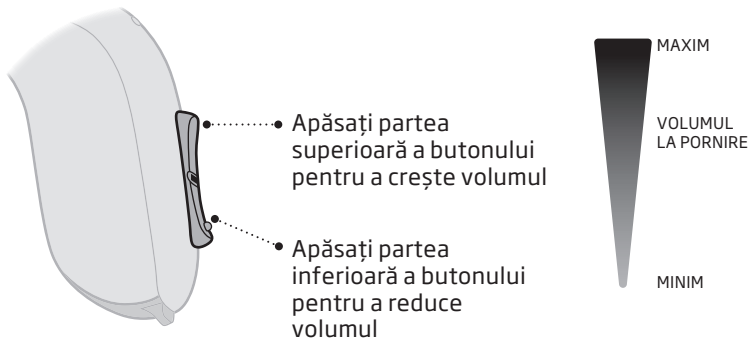Folosiți întotdeauna același tip de filtru de cerumen precum cel furnizat inițial cu proteza auditivă. Dacă aveți întrebări în ceea ce privește utilizarea sau înlocuirea filtrelor de cerumen, adresați-vă specialistului dvs. pentru protezare auditivă.

## Modificați volumul

Butonul vă permite să reglați volumul.  
Atunci când creșteți sau reduceți volumul, veți auzi un bip.


Pentru informații privind tonurile, consultați secțiunea **Indicatori sonori și luminoși LED**.



## Schimbați programul

Proteza dvs. auditivă poate avea până la patru programe diferite. Acestea sunt programate de către specialistul pentru protezare auditivă. Veți auzi între unu și patru tonuri sau o notificare vocală (opțional) atunci când schimbați programul, în funcție de program.

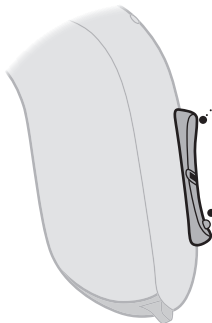Pentru informații privind tonurile, consultați secțiunea **Indicatori sonori și luminoși LED**.



● Apăsați butonul de comandă timp de aproximativ două secunde pentru a comuta între programe:

Apăsați partea superioară a butonului pentru a trece la programul următor, de exemplu de la programul 1 la 2.

Apăsați partea inferioară a butonului pentru a trece la programul anterior, de exemplu de la programul 4 la 3.

Pentru informații privind duratele de apăsare ale butonului, consultați tabelul **Prezentare generală a setărilor pentru proteza dumneavoastră auditivă** din secțiunea **Setările individuale ale protezei dumneavoastră auditive** de la sfârșitul acestui prospect.

## **Activarea/dezactivarea sunetul protezelor auditive**

Folosiți funcția de oprire sunet dacă doriți ca proteza auditivă să nu mai redea sunete. Funcția de dezactivare a sunetului afectează doar microfonul/microfoanele protezei auditive.

Vă puteți dezactiva protezele auditive folosind una dintre următoarele aplicații și dispozitive opționale\*:

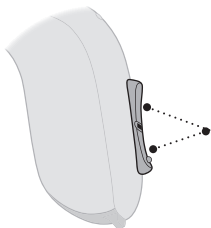
- Oticon Companion
- ConnectClip
- Remote Control 3.0

### **Cum se pornește sunetul protezelor auditive**

Puteți reactiva sunetul protezelor auditive folosind una dintre aplicațiile și dispozitivele opționale.

Alternativ, utilizați butoanele de comandă de pe proteza auditivă:

\*Pentru mai multe informații, consultați secțiunea **Accesorii wireless și alte opțiuni**



### **Pentru dezactivarea sunetului**

Aplicați o apăsare prelungită (4 secunde) pe oricare dintre capetele butonului pentru a dezactiva sunetul protezei auditive. Un semnal sonor descendent vă confirmă acțiunea.

### **Pentru reactivare**

Pentru a reactiva proteza auditivă, apăsați scurt butonul.

### **NOTIFICARE IMPORTANTĂ**

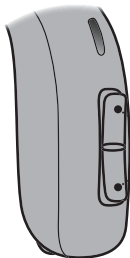
Nu folosiți funcția de oprire a sunetului ca buton de OPRIRE deoarece protezele auditive tot mai folosesc bateria în acest mod.

## **PORNIREA/OPRIREA Bluetooth**

Conectivitatea Bluetooth® poate fi PORNITĂ/OPRITĂ pentru protezele auditive. Când Bluetooth este dezactivat (mod avion), protezele auditive rămân pornite și funcționează în continuare. Rețineți că apăsarea butonului de la o proteză auditivă OPREȘTE Bluetooth-ul de la ambele proteze auditive.

Pentru informații privind sunetele și indicatorii luminoși, consultați secțiunea **Indicatori sonori și luminoși LED**.

Protezele auditive folosesc tehnologia wireless Bluetooth. Acestea pot fi folosite la bordul aeronavelor deoarece protezele auditive sunt exceptate de la regulile aplicate dispozitivelor electronice portabile aflate la bordul aeronavelor.



**Pentru a activa și dezactiva**

Apăsați oricare dintre capetele butonului timp de cel puțin 7 secunde. O scurtă melodie confirmă acțiunea dvs.

Deschiderea și închiderea sertarului pentru baterie va reactiva, de asemenea, funcția Bluetooth.

# Folosirea protezelor auditive cu dispozitive digitale

## iPhone, iPad, Mac și Vision Pro

Protezele auditive sunt Made for iPhone și permit transmisiuni directe și comunicarea cu mâini libere de la iPhone, iPad, Mac sau Vision Pro.\*

## Dispozitive Android™

Protezele dumneavoastră auditive acceptă Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) și Bluetooth® LE Audio pentru comunicare hands-free de pe anumite dispozitive Android\*. Protezele auditive folosesc și tehnologia Auracast™. Această tehnologie vă permite să vă conectați la transmisiuni Auracast și să partajați sunetul cu dispozitive compatibile\*. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Transmisiune Auracast”.

Oticon Companion poate fi folosită pentru a vă controla protezele auditive de pe dispozitivul mobil.\*

Pentru asistență la folosirea protezelor auditive cu oricare dintre aceste produse, contactați specialistul dvs. pentru protezare auditivă.

\* Pentru o listă a dispozitivelor smart compatibile, vizitați: [www.oticon.global/compatibility](http://www.oticon.global/compatibility).

## **Asocierea și compatibilitatea**

Pentru instrucțiuni despre asocierea protezelor auditive cu dispozitivul smart, vizitați:

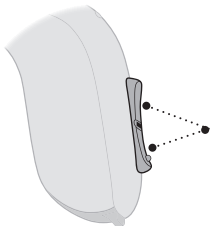
[www.oticon.global/pairing](http://www.oticon.global/pairing)

Pentru o listă a dispozitivelor smart compatibile, vizitați:

[www.oticon.global/compatibility](http://www.oticon.global/compatibility)

# Gestionarea apelurilor

Puteți să răspundeți, să respingeți sau să încheiați apelurile telefonice cu ajutorul butonului de pe protezele auditive. Pentru această funcționalitate, protezele dumneavoastră auditive trebuie să fie împerecheate cu un dispozitiv mobil compatibil.\*



## **Pentru a accepta**

Utilizați o apăsare scurtă pe oricare dintre capetele butonului pentru a prelua un apel telefonic. Un ton scurt confirmă acțiunea dvs.

## **Pentru a respinge**

Apăsați prelung pe oricare dintre capetele butonului pentru a respinge un apel telefonic. Un ton scurt și descrescător confirmă acțiunea dvs.

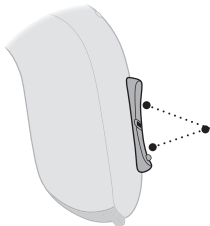
## **Pentru a încheia**

Apăsați prelung pe oricare dintre capetele butonului pentru a încheia un apel telefonic. Un ton scurt și descrescător confirmă acțiunea dvs.

\* Pentru o listă a dispozitivelor smart compatibile, vizitați: [www.oticon.global/compatibility](http://www.oticon.global/compatibility).

## Broadcast Auracast

Puteți încheia o transmisie Auracast de la butoanele protezelor auditive. Pentru a vă conecta la un broadcast Auracast, consultați manualul televizorului sau dispozitivului mobil pentru disponibilitate și instrucțiuni de conectare.



### **Pentru a încheia o transmisie Auracast**

Apăsați oricare dintre capetele butonului de pe proteza auditivă timp de aproximativ două secunde.

Pentru a utiliza funcționalitatea Auracast, protezele auditive trebuie să fie asociate cu un dispozitiv compatibil.\*

\* Pentru o listă a dispozitivelor smart compatibile, vizitați: [www.oticon.global/compatibility](http://www.oticon.global/compatibility)

## **Accesoriiile wireless și alte opțiuni**

Este disponibilă o gamă de accesorii care îmbunătățesc funcționalitatea protezelor dumneavoastră auditive wireless. Acestea vă permit să auziți și să comunicați mai bine în situații cotidiene.

### **ConnectClip**

Un dispozitiv care poate fi folosit ca microfon de la distanță și cască mâini libere atunci când este asociat cu telefonul mobil.

### **Phone Adapter 2.0**

Un dispozitiv care atunci când este folosit împreună cu protezele auditive și ConnectClip, vă permite să comunicați cu mâini libere printr-un telefon fix.

### **Adaptorul TV 3.0**

Un dispozitiv care transmite sunetul de la un TV sau dispozitiv electronic audio către protezele auditive.

### **Remote Control 3.0**

Un dispozitiv care vă permite să schimbați programul, să reglați volumul sonor sau să opriți sunetul protezelor auditive.

## EduMic

Un dispozitiv care poate fi folosit ca un microfon de la distanță într-o sală de clasă, mediu de lucru, spațiu public (folosind Bobina de telefon) și alte setări.

## Oticon Companion

O aplicație care vă oferă acces wireless la protezele dvs. auditive prin intermediul unui dispozitiv mobil pentru controlul funcționalității și care permite actualizarea de la distanță a acestora. Pentru dispozitive iPhone, iPad, Vision Pro și Android. Asigurați-vă că descărcați Oticon Companion doar din versiunea oficială de App Store și Play Store.

## Bobina de telefon

Bobina de telefon vă ajută să auziți mai bine atunci când folosiți un telefon cu o buclă încorporată sau când vă aflați în clădiri cu sisteme de tele-buclă, cum ar fi teatre, lăcașuri de cult sau săli de lectură. Acest simbol este afișat dacă a fost instalată o tele-buclă.





## Sertar pentru baterie rezistent la manipulare (opțional)

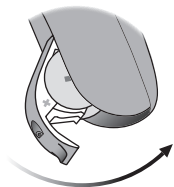
Majoritatea protezelor auditive pot fi prevăzute cu un sertar al bateriei rezistent la forțare. Acest lucru este recomandat cu tărie pentru sugari, copii mici și persoane cu deficit cognitiv.

### **NOTIFICARE IMPORTANTĂ**

Nu aplicați o forță excesivă la deschiderea sertarului bateriei atunci când este închis. Nu forțați sertarul bateriei peste poziția complet deschis. Asigurați-vă că ați introdus corect bateria.


Contactați specialistul dvs. pentru protezare auditivă dacă suspectați reducerea eficienței rezistenței la forțare sau a capacității de blocare de la sertarul bateriei.

## Blocarea sertarului pentru baterie




Închideți complet sertarul pentru baterie și asigurați-vă că este blocat.

## Instrument pentru deblocarea sertarului bateriei

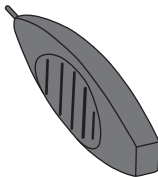

Folosiți acest mic instrument asigurat de specialistul dvs. pentru protezare auditivă.

## Deblocați sertarul bateriei

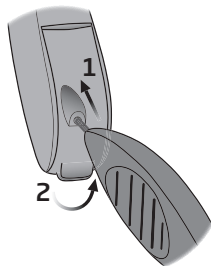

Înserați vârful instrumentului în gaura din spatele sertarului de baterie.

1. Introduceți complet instrumentul și mențineți-l.
2. Ridicați pentru a deschide sertarul.

## **Tinnitus SoundSupport™ (opțional)**

### **Modul de utilizare al Tinnitus SoundSupport**

Tinnitus SoundSupport este o unealtă concepută pentru a genera sunete care să ofere un ajutor temporar pacienților care suferă de tinitus ca parte a programului de management pentru tinitus.

Populația vizată constă în populația adultă de peste 18 ani.

Tinnitus SoundSupport este destinat specialiștilor în protezare auditivă (audiologi, specialiști în proteze auditive sau otorinolaringologi) care sunt familiari cu evaluarea și tratarea tinitus și a pierderii auzului. Montarea Tinnitus SoundSupport trebuie realizată de specialistul pentru protezare auditivă care participă la un program de gestionare a tinitusului.

## Ghid pentru utilizatorii Tinnitus SoundSupport

Specialistul dvs. în protezare auditivă vă va putea oferi serviciile ulterioare de îngrijire adecvată. Este importantă respectarea sfatului și indicațiilor referitoare la această îngrijire.

### Limitarea duratei de utilizare

#### Utilizarea zilnică

Nivelul volumului sonor pentru Tinnitus SoundSupport poate fi setat la un nivel care ar putea cauza vătămarea permanentă a auzului atunci când este folosit pentru o perioadă lungă de timp. Specialistul dvs. în protezare auditivă vă va recomanda de câte ori puteți utiliza Tinnitus SoundSupport într-o zi. A nu se utiliza niciodată la niveluri inconfortabile.

Consultați tabelul **Tinnitus SoundSupport: Limitarea duratei de utilizare** din secțiunea **Setări individuale pentru proteza dvs. auditivă** de la finalul acestui ghid pentru a afla câte ore pe zi puteți folosi în siguranță un sunet de ajutor în proteza dvs. auditivă.

## Opțiuni de sunet și ajustările volumului

Tinnitus SoundSupport este programat de specialistul dvs. în protezare auditivă pentru a fi adecvat pierderii auzului dvs. și preferințelor pentru tratarea tinitusului.

### Programe Tinnitus SoundSupport

Generatorul de sunet poate fi activat pentru până la patru programe diferite.

### Fără sunet

Dacă vă aflați într-un program cu Tinnitus SoundSupport activat, funcția oprire sunet oprește doar sunetele mediului ambiant, nu și sunetul de la Tinnitus SoundSupport. Pentru informații privind dezactivarea sunetului protezelor auditive, consultați secțiunea **Dezactivarea sunetului protezelor auditive**.

## **Reglarea volumul cu Tinnitus SoundSupport**

Specialistul pentru protezare auditivă poate seta controlul volumului pentru un program al protezei auditive la care este activat Tinnitus SoundSupport.

Pentru informații despre reglarea volumului cu Tinnitus SoundSupport consultați tabelul **Prezentarea setărilor Tinnitus SoundSupport pentru proteza dvs. auditivă**, din secțiunea **Setările individuale ale protezei dvs. auditive** de la finalul acestei broșuri.

## **Avertismente referitoare la Tinitus**

Dacă specialistul dvs. în protezare auditivă a activa generatorul de sunet Tinnitus SoundSupport,, vă rugăm să acordați atenție următoarelor avertismente.

Există anumite preocupări asociate cu utilizarea oricărui sunet generat de către un dispozitiv de management al tinitusului. Printre acestea se regăsește și potențiala înrăutățire a tinitusului și/sau o posibilă modificare a pragului de auz.

Dacă observați o modificare a auzului sau a tinitusului sau orice amețală, greață, durere de cap, palpitații cardiace sau eventuale iritații ale pielii în locul de contact cu dispozitivul, trebuie să întrerupeți imediat utilizarea dispozitivului și consultați un specialist medical, audiolog sau un alt specialist în protezare auditivă.

La fel ca în cazul oricărui dispozitiv, utilizarea incorectă a funcției de generator de sunet poate cauza eventuale efecte dăunătoare. Trebuie să fiți atenți și să împiedicați utilizarea neautorizată și să nu țineți dispozitivul la îndemâna copiilor sau animalelor de companie.

### **Durata maximă de purtare**

Respectați întotdeauna durata maximă de utilizare zilnică a Tinnitus SoundSupport recomandată de specialistul dvs. în protezare auditivă. Utilizarea prelungită poate produce agravarea tinitusului sau a pierderii auzului.

## **Avertismente generale**

Pentru siguranța dvs. personală și pentru a asigura o utilizare corectă, citiți cu atenție următoarele avertismente generale înainte de a utiliza protezele auditive.

Consultați-vă specialistul pentru protezare auditivă dacă protezele auditive prezintă un comportament neașteptat sau dacă aveți incidente grave cu protezele auditive. Specialistul pentru protezare auditivă vă va ajuta cu problema și, dacă este cazul, va raporta situația producătorului și/sau autorităților naționale.

Rețineți că protezele auditive nu vor restabili auzul normal și nu vor preveni sau îmbunătăți o degradare a auzului care apare în urma unor procese naturale, cum ar fi îmbătrânirea sau îmbolnăvirea.

Protezele auditive sunt doar o parte din refacerea auzului și poate fi necesar să fie ajutată de instruirea sistemului auditiv și de instrucțiunile privind cititul pe buze.

Pentru a beneficia pe deplin de protezele auditive, trebuie să le folosiți frecvent.

### **Utilizarea protezelor auditive**

Proteza auditivă trebuie folosită doar conform instrucțiunilor specialistului pentru protezare auditivă. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la pierderea bruscă și permanentă a auzului. Nu permiteți niciunei alte persoane să vă poarte protezele auditive. Utilizarea neautorizată ar putea cauza deteriorarea permanentă a auzului acestora.

### **DemoFlex: Informații importante pentru specialiștii pentru protezare auditivă**

Accesați centrul de resurse Mergeți la Centrul de descărcare ([www.oticon.global/hearing-aid-users/support/information/downloads](http://www.oticon.global/hearing-aid-users/support/information/downloads)) pentru instrucțiuni privind manipularea protezei auditive între utilizări.

### **Pericol de sufocare ca urmare a ingerării pieselor mici**

Țineți toate piesele mici (de exemplu, aparate auditive, căști, baterii etc.) departe de accesul și de vederea copiilor și a altor persoane care ar putea înghiți aceste obiecte.

## **Avertismente generale**

Majoritatea protezelor auditive pot fi prevăzute cu un sertar al bateriei rezistent la forțare. Acest lucru este recomandat cu tărie pentru sugari, copii mici și persoane cu deficit cognitiv.

Bateriile sunt uneori confundate cu medicamente. Așadar, verificați-va tabletele înainte să le înghițiți.

*Solicitați imediat asistență medicală de urgență dacă cineva se sufocă cu piese mici sau dacă sunt înghițite bateriile.*

### **Risc de introducere a bateriilor în ureche sau în nas**

Nu introduceți niciodată bateriile în ureche sau în nas. Acest lucru poate produce la leziuni permanente din cauza arsurilor. Contactați imediat un medic dacă o baterie este introdusă în ureche sau în nas.

### **Utilizarea de baterii de unică folosință**

Folosii doar baterii recomandate de specialistul pentru protezare auditivă. Bateriile de slabă calitate se pot scurge și vă pot răni.

Nu încercați niciodată să reîncărcați bateriile de unică folosință.

Nu aruncați niciodată bateriile în foc. Pericol de explozie a bateriilor. Respectați recomandările locale pentru aruncarea corectă și în siguranță a bateriilor.

### **Atenție la apariția unei defectări bruște**

Protezele auditive pot înceta să mai funcționeze fără să vă anunțe. De exemplu, dacă rămân fără baterie sau dacă tubul este blocat. Țineți cont de acest lucru mai ales în situațiile în care depindeți de sunetele de avertizare (de exemplu, în trafic).

### **Utilizarea cu implanturi medicale active**

Protezele dvs. auditive au fost testate și dezvoltate în mod riguros pentru sănătatea umană conform standardelor internaționale pentru expunerea umană (Raportul de absorbție specifică - SAR), puterea electromagnetică indusă și tensiunile transmise în corpul uman.

Valorile expunerii sunt mult sub limitele de siguranță acceptate internațional pentru

SAR, puterea electromagnetică indusă și tensiunile transmise în corpul uman definite de standardele pentru sănătatea omului și coexistă cu implanturile medicale active, cum sunt stimulatoarele cardiace și defibrilatoarele cardiace.

Dacă aveți un implant activ pe creier, cereți sfatul producătorului pentru informații privind utilizarea împreună cu o proteză auditivă.

Accesoriile cu magneți încorporați (de exemplu, magnetul Autophone și MultiTool) trebuie ținute la o distanță de cel puțin 30 cm (12 inci) de orice dispozitiv medical implantat.

Urmați instrucțiunile producătorului dispozitivului medical implantat în ceea ce privește utilizarea acestuia împreună cu magneți.

### **Utilizarea cu implanturi cohleare**

Dacă folosiți un implant cohlear (CI) la o ureche și o proteză auditivă la cealaltă, asigurați-vă să țineți mereu CI la o distanță de cel puțin 1 cm (0,4 inch) de proteza auditivă. Câmpul magnetic de la CI poate deteriora permanent unitatea

de difuzor de la proteza auditivă. Nu puneți niciodată dispozitivele apropiate pe o masă, (de exemplu atunci când curățați sau schimbați bateriile). Nu transportați CI și proteza auditivă împreună în aceeași cutie.

### **Detasați piesa auriculară în canalul auricular**

Asigurați-vă că oliva auriculară este încă conectată la tub atunci când scoateți proteza auditivă din ureche. Dacă oliva auriculară nu se află pe tub, este posibil să fi rămas în canalul auditiv. Consultați specialistul dvs. pentru protezare auditivă.

### **Efecte secundare potențiale**

Este posibil să produceți mai mult cerumen atunci când folosiți proteze auditive. În cazuri rare, materialele non-alergenice din produs pot provoca iritații ale pielii sau alte efecte secundare. Dacă apare orice astfel de efect secundar, consultați medicul.

## **Avertismente generale**

### **Scoateți protezele auditive înaintea anumitor proceduri medicale**

Scoateți protezele auditive de pe ureche înaintea unor proceduri medicale cum ar fi investigații (raze X, CT, RM, PET), electroterapie, intervenții chirurgicale. Protezele auditive ar putea fi afectate de expunerea la câmpuri magnetice sau electromagnetice puternice.

### **A se ține departe de căldura extremă**

Nu vă expuneți niciodată protezele auditive la căldură extremă. De exemplu, nu vă lăsați protezele auditive în interiorul unei mașini parcate la soare.

Nu folosiți niciodată un dispozitiv de încălzire extern pentru a vă usca protezele auditive. De exemplu, nu vă uscați protezele auditive folosind un uscător de păr sau într-un cuptor, cum ar fi un cuptor cu microunde.

### **A se ține departe de substanțe chimice**

Scoateți-vă protezele auditive înainte de a aplica produse care conțin anumite substanțe chimice care vă pot deteriora protezele auditive. De exemplu, produse cosmetice, sprayuri de păr,

parfumuri, loțiuni de bărbierit, loțiuni de plaja și loțiuni împotriva insectelor. Lăsați produsele să se usuce înainte de a vă pune protezele auditive.

### **Conexiune la echipamentul extern**

Siguranța protezei auditive, atunci când este conectată la echipamente externe printr-un cablu de intrare auxiliar și/sau prin cablu USB și/sau direct, este determinată de sursa externă de semnal. Atunci când proteza auditivă este conectată la echipamente externe alimentate de la rețeaua electrică, aceste echipamente trebuie să fie conforme cu standardul IEC 62368-1 sau cu standarde de siguranță echivalente.

### **Utilizarea accesoriilor de la terțe părți**

Folosiți doar accesoriile, cabluri sau traductoare (de exemplu, microfoane) furnizate de producător. Accesoriile neoriginale pot avea ca rezultat reducerea compatibilității electromagnetice (CEM) a protezelor auditive.

### **Nu modificați protezele auditive**

Nu aduceți nicio modificare protezelor auditive care nu a fost aprobată în mod expres de către producător. Acest lucru va anula garanția.

### **⚠️ Utilizarea în câmpuri cu interferențe electromagnetice**

Protezele dvs. auditive au fost testate detaliat pentru interferențe în conformitate cu cele mai stricte standarde internaționale, inclusiv EN/CEI 60601-1-2 și modificările sale. Interferențele electromagnetice pot apărea în apropierea unor echipamente care pot afecta performanța protezelor auditive, cum ar fi telefoanele mobile, routerele Wi-Fi sau alte echipamente cu simbolul afișat. Dacă protezele auditive sunt afectate de interferențe, îndepărtați-vă de sursă.

### **Proteza auditivă Power**

Trebuie acordată o atenție deosebită la alegerea, adaptarea și utilizarea protezelor auditive de putere înaltă, deoarece capacitatea lor maximă de presiune sonoră poate depăși 132 dB. Poate apărea riscul de afectare a auzului rămas la utilizatorul protezei auditive. Pentru a afla dacă proteza dvs. este o proteza auditivă power, consultați secțiunea prezentarea modelului din această broșură.

## Găsirea informațiilor despre produs

Informațiile despre protezele dumneavoastră auditive, inclusiv numărul de serie, marcajul CE și data fabricației, se găsesc pe și deasupra sertarului pentru baterie al protezelor dumneavoastră auditive.

### **NOTIFICARE IMPORTANTĂ**

Specialistul pentru protezare auditivă vă poate furniza, de asemenea, numărul de serie marcat pe protezele auditive.

## Protecția la apă și praf (IP68)

Proteza dvs. auditivă este protejată la praf și împotriva pătrunderii apei, ceea ce înseamnă că este concepută să fie purtată în toate situațiile zilnice. De aceea, nu trebuie să vă îngrijorați de umiditate sau dacă o udați de la ploaie. Dacă proteza auditivă a intrat în contact cu apa și nu mai funcționează, vă rugăm respectați aceste instrucțiuni:

1. Ștergeți ușor toată apa
2. Deschideți sertarul bateriei, scoateți bateria și ștergeți ușor toată apa din sertarul bateriei
3. Lăsați proteza auditivă să se usuce cu sertarul bateriei deschis pentru aproximativ 30 de minute
4. Introduceți o baterie nouă

### NOTIFICARE IMPORTANTĂ

Nu purtați proteza auditivă atunci când faceți duș sau participați la activități acvatice. Nu introduceți proteza auditivă în apă sau alte lichide.

## Condiții de utilizare

<b>Condiții de funcționare</b>	Temperatură: De la +1°C la +40°C (de la 34°F la 104°F) Umiditate: 5 până la 93 % umiditate relativă, fără condensare Presiune atmosferică: de la 700 hPa până la 1060 hPa
<b>Condițiile de transport și depozitare</b>	Temperatura și umiditatea nu trebuie să depășească limitele de mai jos pe durata transportului și depozitării:  <b>Transportare:</b> Temperatură: De la -25°C la +60°C (de la -13°F la 140°F) Umiditate: 5 până la 93 % umiditate relativă, fără condensare Presiune atmosferică: de la 700 hPa până la 1060 hPa <b>Depozitare:</b> Temperatură: De la -25°C la +60°C (de la -13°F la 140°F) Umiditate: 5 până la 93 % umiditate relativă, fără condensare Presiune atmosferică: de la 700 hPa până la 1060 hPa

## Informații tehnice

Proteza auditivă conține următoarele două tehnologii radio:

Proteza auditivă conține un radiotransmițător-receptor care utilizează tehnologie de inducție magnetică pe rază scurtă și funcționează la 3,84 MHz. Puterea câmpului magnetic a transmițătorului este foarte slabă și este mereu sub 15 nW (de obicei sub  $-15 \text{ dB}\mu\text{A/m}$  la o distanță de 10 metri ( $-4.6 \text{ dB}\mu\text{A/ft}$  la o distanță de 33 picioare)).

Proteza auditivă conține, de asemenea, un radiotransmițător-receptor care utilizează tehnologia Bluetooth Low Energy și o tehnologie radio proprietară pe rază scurtă, ambele funcționând în banda ISM de 2,4 GHz.

Transmițătorul radio este de putere redusă, iar puterea sa radiată este întotdeauna sub 2 mW.

Folosiți proteza auditivă doar în zonele unde este permisă transmisiunea wireless.

Proteza auditivă respectă standardele internaționale referitoare la transmițătoarele radio, compatibilitatea electromagnetică și expunerea umană.

Proteza auditivă este concepută pentru a funcționa în medii publice și rezidențiale. A trecut următoarele teste de emisii și imunitate aplicabile:

Cerințele privind emisiile radiate pentru un dispozitiv CISPR 11 Grupa 1 Clasa B, conform tabelului 2 din CEI 60601-1-2.

Emisii radiate pentru dispozitive de comunicație care funcționează în banda ISM de 2,4 GHz, conform 47 CFR Part 15, subpartea C, RSS-247 și EN 300 328 (doar pentru produsele cu Bluetooth).

Emisii radiate pentru comunicații prin inducție magnetică în câmp apropiat care funcționează la 3,84 MHz, conform 47 CFR Part 15, subpartea C, RSS-210 și EN 300 330 (doar pentru produsele cu NFMI).

Imunitate la câmpuri de radiofrecvență radiată la un nivel de câmp de 10 V/m între 80 MHz și 2,7 GHz, conform tabelului 4 din IEC 60601-1-2, și de 3 V/m între 2,7 și 6,0 GHz, conform CISPR 32.

Imunitate la câmpuri de radiofrecvență radiată la un nivel de câmp de până la 28 V/m pentru anumite benzi de comunicații RF fără fir între 380 MHz și 5,8 GHz, conform tabelului 9 din IEC 60601-1-2.

Imunitate la câmpuri de radiofrecvență radiată la un nivel de câmp de până la 65 A/m pentru anumite câmpuri magnetice de proximitate la 30 kHz, 134,2 kHz și 13,56 MHz, conform tabelului 11 din IEC 60601-1-2 AM1.

Niveluri de imunitate la câmpuri de radiofrecvență radiată, pe anumite benzi, conform IEC 60118-13, între 25 V/m și 60 V/m și, pentru câmpurile de proximitate generate de dispozitive de comunicații ținute la ureche, conform ANSI C63.19.

Imunitate la câmpuri magnetice de frecvență a rețelei electrice la un nivel de câmp de 30 A/m, conform tabelului 4 din IEC 60601-1-2 (doar pentru produsele cu telecoil).

Imunitate la descărcări electrostatice (ESD) la niveluri de +/- 2, 4 și 8 kV pentru descărcări prin contact și +/- 2, 4, 8 și 15 kV pentru descărcări prin aer, conform tabelului 4 din IEC 60601-1-2.

Datorită spațiului limitat al protezei auditive, marcajele relevante de aprobare se găsesc în acest ghid.

Informații suplimentare se găsesc în documentul Date tehnice de la [www.oticon.global](http://www.oticon.global)

Producătorul declară că această proteză auditivă este fabricată în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE.

Acest dispozitiv medical satisface cerințele Regulamentului privind dispozitivele medicale (UE) 2017/745.

Declarația de conformitate este disponibilă de la sediul central.

Oticon A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Danemarca  
[www.oticon.global/doc](http://www.oticon.global/doc)

CE 0123

 **AURACAST**  
A BLUETOOTH® TECHNOLOGY

 **Bluetooth®**



SBO Hearing A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Danemarca



Deșeurile electronice  
trebuie manipulate  
conform legislației  
locale.



**IP68**

Apple, sigla Apple, iPhone, iPad, Vision Pro, Apple Watch, Mac și sigla Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii și în alte țări. App Store este o marcă de servicii a Apple Inc.

Utilizarea ecusonului Made for Apple înseamnă că un accesoriu a fost proiectat pentru a se conecta în mod specific la produsul (produsele) Apple identificat(e) pe ecuson și a fost certificat de către dezvoltator că îndeplinește standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabilă de funcționarea acestui dispozitiv sau pentru conformitatea sa cu standardele de siguranță și de reglementare.

Android, Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Denumirea și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. Denumirea și siglele Auracast™ sunt mărci comerciale deținute de Bluetooth SIG, Inc. Orice utilizare a acestor mărci de către Demant se face în baza unei licențe. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

## Descrierea simbolurilor care însoțesc produsul



### **Avertismente**

Textul marcat cu un simbol de avertizare trebuie citit înainte de a folosi dispozitivul.



### **Producător**

Dispozitivul este realizat de producătorul al cărui nume și adresă sunt menționate lângă simbol. Indică producătorul dispozitivului medical, astfel cum este definit în Regulamentul UE 2017/745.



### **Marcaj CE**

Dispozitivul se conformează tuturor regulamentelor și directivelor UE obligatorii. Numărul din patru cifre prezintă identificarea organismului notificat.



### **Deșeurile electronice (WEEE)**

Reciclați protezele auditive, accesoriile sau bateriile conform reglementărilor locale. Utilizatorii protezei auditive pot returna deșeurile electronice la specialistul dvs. pentru protezare auditivă pentru a fi aruncate. Echipament electronic acoperit de Directiva 2012/19/UE privind deșeurile și echipamentele electrice (WEEE).



### **Marcajul de conformitate cu organismul de reglementare (RCM)**

Dispozitivul respectă cerințele privind siguranța electrică, CEM și spectrul radio pentru dispozitivele pentru piesele din Australia sau Noua Zeelandă.

IP68

### **Codul IP**

Indică clasa de protecție împotriva pătrunderii dăunătoare a apei și a particulelor solide, conform EN 60529. IP6X indică nivelul general de protecție la prof. IPX8 indică protecția la efectele scufundării continue în apă.



### **Sigla Bluetooth**

Marca comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. pentru care orice utilizare necesită o licență.

## Descrierea simbolurilor care însoțesc produsul



### **Auracast**

Marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. pentru care orice utilizare necesită o licență.



### **Etichetele Made for Apple**

Indică faptul că dispozitivul este compatibil cu iPhone și iPad.



### **Ecusonul Mac**

Indică faptul că dispozitivul este compatibil cu Mac.



### **Ecusonul Apple AirPlay**

Butonul AirPlay poate fi folosit pentru a deconecta și conecta protezele auditive la un Mac.



### **Ecusonul Android**

Indică faptul că dispozitivul este compatibil cu Android.



### **Bucă auditivă**

Această siglă include simbolul universal pentru asistența auditivă. „T”-ul înseamnă că este instalată o buclă auditivă.



### **Transmițătorul în radio frecvență (RF)**

Proteza dvs. auditivă conține un transmițător RF.



### **Număr articol pentru comerțul global**

Un număr global unic din 14 cifre folosit pentru identificarea produselor dispozitive medicale, inclusiv software-ul dispozitiv medical. GTIN din această broșură se referă la firmware-ul dispozitivului medical (FW). GTIN de pe eticheta de reglementare de pe ambalaj se referă la hardware-ul dispozitivului medical.

## Descrierea simbolurilor care însoțesc produsul

**FW**

**FW**

Versiunea firmware folosită la dispozitiv.



**A se păstra uscat**

Indică un dispozitiv medical care trebuie protejat de umezeală.

**REF**

**Numărul de catalog**

Indică numărul de catalog al producătorului pentru a identifica dispozitivul medical.

**SN**

**Numărul de serie**

Indică numărul de serie al producătorului pentru a identifica un anumit dispozitiv medical.

**MD**

**Dispozitiv medical**

Dispozitivul este un dispozitiv medical.

**UDI**

**Identificator unic al dispozitivului**

Indică un transportator care conține informații privind identificatorul unic al dispozitivului.

## Garanția internațională

Dispozitivul este acoperit de o garanție internațională eliberată de producător. Aceasta garanție internațională acoperă defectele de fabricare și de material ale dispozitivului, însă nu și accesoriile, cum ar fi bateriile, tuburile, difuzoarele, piesele auriculare și filtrele, etc. Problemele cauzate de manevrarea sau întreținerea inadecvată sau incorectă, accidente, reparații făcute de persoane neautorizate, expunerea la condiții corozive, modificări fizice din urechea dvs., obiecte străine introduse în proteza auditivă, sau reglările incorecte NU sunt acoperite de această garanție internațională și o pot anula. Garanția internațională de mai sus nu afectează drepturile legale pe care le aveți în conformitate cu legislația națională în vigoare care reglementează vânzarea

bunurilor de consum din țara în care ați cumpărat dispozitivul. Specialistul pentru protezare auditivă poate emite și acesta o garanție care depășește clauzele acestei garanții internaționale. Vă rugăm să consultați specialistul pentru protezare auditivă pentru mai multe informații.

### **Dacă aveți nevoie de service**

Duceți dispozitivul la specialistul dvs. pentru protezare auditivă, care ar putea să soluționeze imediat problemele și reglajele minore. Specialistul pentru protezare auditivă vă poate factura pentru serviciile sale.

# Garanția

## Certificat

Numele clientului: \_\_\_\_\_

Specialistul pentru protezare auditivă: \_\_\_\_\_

Adresa specialistului pentru protezare auditivă: \_\_\_\_\_

Numărul de telefon al specialistului pentru protezare auditivă: \_\_\_\_\_

Data achiziționării: \_\_\_\_\_

Perioada de garanție: \_\_\_\_\_ Luna: \_\_\_\_\_

Model stânga: \_\_\_\_\_ Nr. serie: \_\_\_\_\_

Model dreapta: \_\_\_\_\_ Nr. serie: \_\_\_\_\_

## Setările individuale ale protezei dvs. auditive

*Se va completa de către specialistul pentru protezare auditivă.*

Tinitus SoundSupport: Limitarea utilizării			
<input type="checkbox"/>	Nicio limitare a utilizării		
	Program	Volum de pornire (Tinitus)	Volum maxim (Tinitus)
<input type="checkbox"/>	1	Max _____ ore pe zi	Max _____ ore pe zi
<input type="checkbox"/>	2	Max _____ ore pe zi	Max _____ ore pe zi
<input type="checkbox"/>	3	Max _____ ore pe zi	Max _____ ore pe zi
<input type="checkbox"/>	4	Max _____ ore pe zi	Max _____ ore pe zi

## Prezentarea setărilor Tinnitus SoundSupport pentru proteza dvs. auditivă

Stânga		Dreapta	
<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu	Tinnitus SoundSupport	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

**A) Modificarea volumului Tinnitus SoundSupport pentru fiecare ureche separat**

Pentru a **crește** sau **reduce** volumul sunetului (doar pentru o singură proteză auditivă), apăsați scurt partea superioară sau inferioară a butonului în mod repetat până la atingere nivelului dorit.

**B) Modificarea volumului Tinnitus SoundSupport simultan în ambele urechi**

Puteți folosi o proteză auditivă pentru a crește/reduce volumul în ambele proteze auditive. Atunci când modificați volumul la o singură proteză auditivă, volumul de la cealaltă proteză auditivă se modifică la fel.

Pentru a **crește** volumul sunetului, apăsați scurt în mod repetat partea superioară a butonului.

Pentru a **reduce** volumul sunetului, apăsați scurt în mod repetat partea inferioară a butonului.

Se va completa de către specialistul pentru protezare auditivă.

## Prezentarea setărilor generale pentru proteza dvs. auditivă





Stânga		Dreapta
<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu		<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
<input type="checkbox"/> Apăsare scurtă <input type="checkbox"/> Apăsare lungă	Schimbați programul	<input type="checkbox"/> Apăsare scurtă <input type="checkbox"/> Apăsare lungă
<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu	Modificați volumul	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu	Fără sunet	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
<b>Indicatori ai reglajului de volum</b>		
<input type="checkbox"/> Pornit <input type="checkbox"/> Oprit	Bipuri la volum min/ max	<input type="checkbox"/> Pornit <input type="checkbox"/> Oprit
<input type="checkbox"/> Pornit <input type="checkbox"/> Oprit	Bipuri la modificarea volumului	<input type="checkbox"/> Pornit <input type="checkbox"/> Oprit
<input type="checkbox"/> Pornit <input type="checkbox"/> Oprit	Bipuri la volumul de pornire	<input type="checkbox"/> Pornit <input type="checkbox"/> Oprit
<b>Indicatori nivel baterie</b>		
<input type="checkbox"/> Pornit <input type="checkbox"/> Oprit	Avertizarea bateriei descărcate	<input type="checkbox"/> Pornit <input type="checkbox"/> Oprit

Se va completa de către specialistul pentru protezare auditivă.

## Sunetul și indicatorii luminoși LED

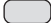
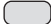



Diferite sunete și modele lumini indică starea protezei auditive. Mai mulți indicatori sunt prezentați în paginile următoare.



Specialistul pentru protezare auditivă poate seta sunetul și indicatorii luminoși LED conform preferințelor dvs.



Program	<input type="checkbox"/> Sunet	<input type="checkbox"/> Lumină LED*	Notificare vocală	Când se utilizează
1	1 ton		<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu	
2	2 tonuri			
3	3 tonuri			
4	4 tonuri			

 Clipire VERDE scurtă

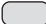\*Lumina LED clipește continuu sau este repetată de trei ori cu pauze scurte.

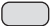

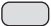








PORNIT/OPRIT	Sunet	Lumină LED	Comentarii lumină LED
PORNIT	<input type="checkbox"/> Melodie	<input type="checkbox"/> 	Afișează o dată
Volum	Sunet	Lumină LED	
Volum de pornire	<input type="checkbox"/> 2 bipuri	<input type="checkbox"/> 	
Volum minim/maxim	<input type="checkbox"/> 3 bipuri	<input type="checkbox"/> 	
Volum sus/jos	<input type="checkbox"/> 1 bip	<input type="checkbox"/> 	Continuu sau repetat de trei ori*
Fără sunet	<input type="checkbox"/> Melodie scurtă descendentă	<input type="checkbox"/> 	

 Clipire VERDE lungă    Clipire VERDE scurtă

 Clipire PORTOCALIE lungă    Clipire PORTOCALIE scurtă

\*Lumina LED clipește continuu sau este repetată de trei ori cu pauze scurte.



Continuare pe următoarea pagină

Accesorii	<input type="checkbox"/> Sunet	<input type="checkbox"/> Lumină LED	Comentarii lumină LED
Adaptorul TV 3.0	2 tonuri diferite	 	Continuu sau repetat de trei ori*
EduMic	2 tonuri diferite	 	
ConnectClip	2 tonuri diferite	 	
Bluetooth	<input type="checkbox"/> Sunet	<input type="checkbox"/> Lumină LED	
Bluetooth OPRIT	Melodie scurtă	  	
Bluetooth PORNIT	Melodie scurtă	 	Afișează o dată

 Clipire VERDE lungă  Clipire VERDE scurtă  Clipire PORTOCALIE scurtă

\*Lumina LED clipește continuu sau este repetată de trei ori cu pauze scurte.

Avertismente	Sunet	Lumină LED	Comentarii lumină LED
Nivel scăzut al bateriei	<input type="checkbox"/> 3 tonuri alternative	<input type="checkbox"/> ●●●●●●●●	Clipire continuă
	<input type="checkbox"/> Notificare vocală		
Oprire baterie	4 tonuri descendente		
	<input type="checkbox"/> Notificare vocală		
Este necesară verificarea microfonului la service	8 bipuri repetate de 4 ori	<input type="checkbox"/> ●●●●	Repetat de patru ori
	<input type="checkbox"/> Notificare vocală		

 Clipire PORTOCALIE lungă
  Clipire PORTOCALIE scurtă

# Depanarea

Simptome	Cauze posibile
Niciun sunet	Baterie moartă
	Piesă auriculară înfundată (dom, Grip Tip, olivă sau Micro olivă)
	Microfonul protezei auditive este oprit
Sunet intermitent sau redus	Orificiu de sunet înfundat
	Umezeala
Sunet șuierător	Piesa auriculară din proteza auditivă nu este introdusă corect în ureche
	Cerumen acumulat în canalul auditiv
	Urechea a crescut
Bipuri	Dacă proteza dvs. auditivă redă 8 bipuri, de 4 ori consecutiv, proteza dvs. auditivă necesită verificarea microfonului
Problemă de împerechere cu dispozitiv inteligent	Conexiunea Bluetooth a eșuat
	Este realizată perechea cu doar o singură proteză auditivă
Probleme de conectivitate cu Mac sau Vision Pro	Probleme audio

## Soluții

Înlocuiți bateria

Curățați mulajul auricular, Micro mould sau LiteTip ori înlocuiți filtrul de cerumen.

Înlocuirea domului sau GripTip

Activați sunetul microfonului protezei auditive

Curățați mulajul auricular, Micro mould sau LiteTip, înlocuiți filtrul de cerumen sau schimbați cupola ori GripTip.

Ștergeți bateria cu o lavetă uscată.

Reintroduceți piesa auriculară

Adresați-vă unui medic ORL-ist pentru a vă examina urechea

Contactați specialistul dvs. pentru protezare auditivă

Contactați specialistul dvs. pentru protezare auditivă

- 1) Anulați asocierea protezei auditive.
- 2) Pe telefon, **OPRIȚI** și **PORNIȚI** din nou Bluetooth.
- 3) Opriți proteza auditivă și apoi porniți-o din nou.
- 4) Împerecheați din nou proteza auditivă (pentru recomandări, vizitați: [www.oticon.global/pairing](http://www.oticon.global/pairing)).

1) Deschideți Centrul de control pe Mac sau pe Vision Pro. 2) Din secțiunea Sunet, faceți clic pe butonul AirPlay pentru a-l OPRI. 3) OPRIȚI și apoi PORNIȚI protezele auditive. 4) În Centrul de control, la secțiunea Sunet, faceți clic pe butonul AirPlay pentru a-l PORNI

### Observație

Dacă niciuna dintre soluțiile de mai sus nu rezolvă problema, consultați specialistul dvs. pentru protezare auditivă.



< 8,15 mm >



>

21 mm

<

< 15 mm >

< 9,0 mm >



**oticon**  
life-changing **technology**